

Tubo de EMG NIM TriVantage™

El nuevo tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage™ ofrece funciones mejoradas para la monitorización nerviosa intraoperatoria durante la cirugía tiroidea y de cabeza y cuello.

T Diseño del tubo

- Tubo de PVC sin DEHP no reforzado de tamaño estándar
- Perfil bajo con electrodos de tinta conductores lisos.
- Marcas azules que facilitan una colocación óptima.


R Menor sensibilidad a la rotación y al movimiento

- Aumento del área de superficie del electrodo.
- Longitud ampliada de la banda de colocación azul.
- Patrón especial para colocación del electrodo en el tubo.

I Aumento de las respuestas del EMG

- EMG mayor y más sólido con una respuesta dos veces mayor.
- Colocación y diseño innovadores de los electrodos.
- Facilita una mejor disección de los nervios.

Utilizado con el NIM® 3.0, el tubo NIM TriVantage monitoriza las cuerdas vocales y los nervios laríngeo recurrente y laríngeo superior.

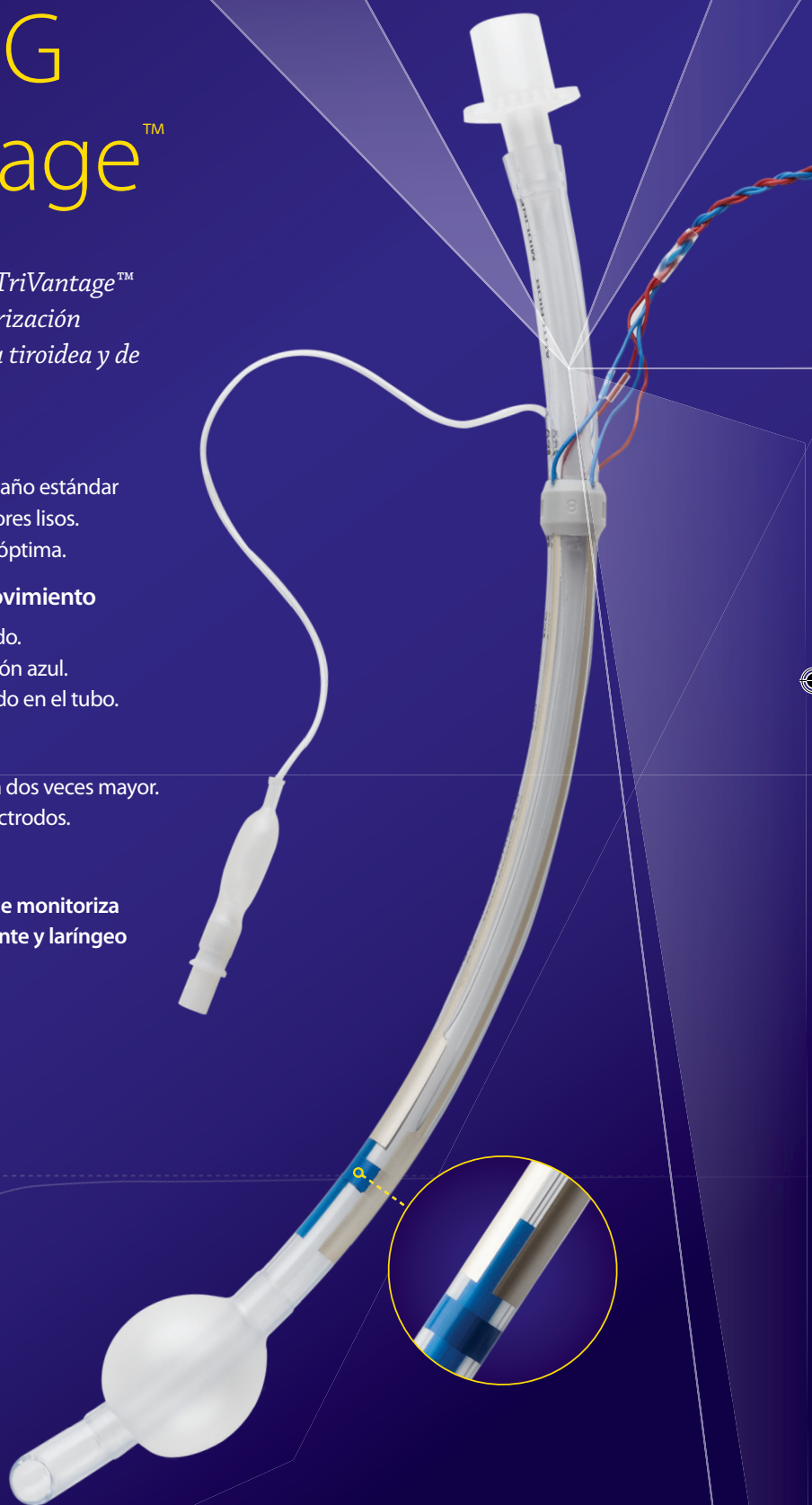


¿Por qué elegir el tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage™?

"La monitorización nerviosa intraoperatoria (IONM) durante la cirugía tiroidea y paratiroidea ha obtenido una aceptación generalizada como complemento del método de referencia, la identificación visual de los nervios." ¹

"La monitorización del nervio laríngeo recurrente (NLR) durante la tiroidectomía tiene tres funciones específicas:

(1) facilitar la identificación nerviosa, (2) facilitar la disección nerviosa y (3) establecer un pronóstico sobre la función nerviosa posoperatoria." ²

"La colocación correcta y segura del tubo es un factor clave para una monitorización eficaz." ^{1,3,4}

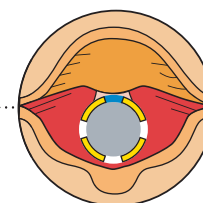

VISTA TRANSVERSAL CON EL TUBO

Los electrodos conductores de tinta de plata están diseñados para la monitorización de las cuerdas vocales.

Un diseño actualizado permite que el tubo mantenga el contacto con las cuerdas vocales, incluso en una situación de rotación.

Información de pedido

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DI	DE	CANTIDAD
8229705	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	5,0 mm	6,5 mm	1
8229706	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	6,0 mm	8,2 mm	1
8229707	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	7,0 mm	9,5 mm	1
8229708	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	8,0 mm	10,7 mm	1
8229709	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	9,0 mm	12,0 mm	1
8229735	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	5,0 mm	6,5 mm	3
8229736	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	6,0 mm	8,2 mm	3
8229737	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	7,0 mm	9,5 mm	3
8229738	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	8,0 mm	10,7 mm	3
8229739	Tubo endotraqueal de EMG NIM TriVantage	9,0 mm	12,0 mm	3

APLICACIONES PARA TUBOS DE EMG NIM

- Tiroidectomía
- Paratiroidectomía
- Fusión cervical anterior
- Disección cervical
- Miotomía cricofaríngea
- Endarterectomía carotídea
- Biopsia cervical
- Laringectomía parcial
- Escisión de un divertículo de Zenker

Si desea obtener más información, llame a Medtronic ENT al número de teléfono 800.874.5797 o 904.296.9600. También puede consultar nuestro sitio web en www.MedtronicENT.com.

1. Randolph GW and Dralle H with the International Intraoperative Monitoring Study Group. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. *Laryngoscope* 2011; 121:S1-S16.
2. Randolph GW. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Chapter 25: Surgical anatomy of the recurrent laryngeal nerve (p316). *Elsevier Science (USA)*, 2003.
3. Dionigi G, et al. The technique of intraoperative neuromonitoring in thyroid surgery. *Surg Technol Int*. 2010; 19:25-37.
4. Chiang FY, et al. Standardization of intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve in thyroid operation. *World J Surg*. 2010 Feb; 34(2):223-9.

Tel. gratuito: (800) 874-5797
Fax: (800) 678-3995
Números de teléfono internacionales
Región del Adriático 385-1-488-1120
Australia 1-800-668-670
Región Báltica 37-1-67560226
Bélgica 32-2456-09-09
Canadá 1-800-217-1617

China 86-21-50800998
República Checa 420-2-9657-9580
Francia 33-470-679-800
Alemania 49-2159-8149-209
Grecia 30-210-67-79-099
Hong Kong 852-2919-1312
Hungría 36-30-5052987
India 91-22-26836733

Israel 972-9-972-4400
Italia 39-02-24137-324
Japón 81-3-6430-2017
Corea 82-2-3404-3600
Libano 961-1-370-670
Luxemburgo 32-2456-09-09
Países Bajos 31-45-566-8800
Polonia 48-22-4656900

Federación de Rusia 7-495-580-73-77
Singapur 65-6776-6255
Sudáfrica 27-11-466-1820
España 34-91-625-05-40
Taiwán 886-2-2183-6000
Reino Unido 44-1923-205-166
Estados Unidos 1-904-296-9600

www.medtronic.eu

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliat 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Teléfono: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

España

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal nº.11
ES-28050 Madrid
www.medtronic.es
Teléfono: +34 91 625 04 00
Telefax: +34 91 650 74 10

