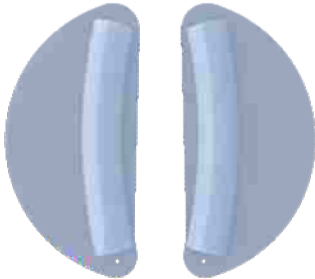


Nombre del producto	Internal Nasal Airway Splint (Férula Nasal Interna con Vía Aérea)		
Referencia/Variantes	Referencia	Especificación	Unidades x Empaque
	F3147S	Férula Nasal Interna con Vía Aérea Standard	10 pares
	F3147L	Férula Nasal Interna con Vía Aérea Larga	10 pares
Uso	<p>Hecha para brindar soporte septal y permitir la respiración después de una cirugía</p> <p>El diseño único de la vía aérea crea una fuerza de gradiente de presión que aumenta el flujo de aire en un 50%. Ese aumento de presión permite mejorar las secreciones respiratorias minimizando el bloqueo.</p> <p>Cada férula tiene en la punta un indicador de sutura para facilitar su fijación al tabique, evitando un desprendimiento posterior. También se puede recortar antes de la inserción</p>		
Material	Silicona de Grado Médico		
Imagen			
Esterilización	Óxido de Etileno		

Presentación	Empacada en una bolsa despegable hecha de material Tyvek grado: 107E3 B. El sistema de embalaje cumple con la norma ISO 1160E7-1:2019. Y su etiquetado de paquetes esta certificado por la norma ISO 15223-1:2016.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz directa.
País de Origen	India
Certificado	EON Meditech Pvt. Ltd., el fabricante, declara que el análisis realizado en el Producto terminado está de acuerdo con la Evolución Biológica siguiendo la norma EN ISO 10993-1:2009